


CareTemp Touch Free Thermometer

Change the temperature scale

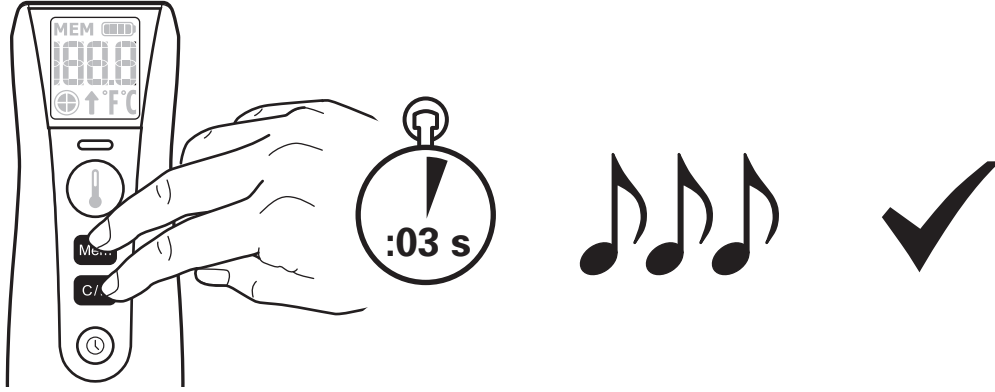

Change the temperature scale

Press and hold both the **MEM** and **C/F** buttons for 3 seconds to change the default scale.
Three beeps sound to confirm the setting is changed.

Skift temperaturskala

Tryk på og hold begge knapperne **MEM** (Hukommelse) og **C/F** nede i 3 sekunder for at ændre standardskalaen.
Der lyder tre bip for at bekræfte, at indstillingen er ændret.

Wechseln der Temperaturskala

Soll die andere Temperaturskala standardmäßig angezeigt werden, die Tasten **MEM C/F** 3 and Sekunden lang gedrückt halten.
Drei Signaltöne bestätigen den Wechsel der Einstellung.

Cambio de la escala de temperatura

Mantenga pulsados los botones **MEM** y **C/F** durante 3 segundos para cambiar la escala predeterminada.
Suenan tres pitidos para confirmar el cambio.

Lämpötila-asteikon vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa oletusasteikon, pidä sekä **MEM**- että **C/F**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
Kolme äänimerkkiä ilmaisee, että asetus on vaihdettu.

Changer d'échelle de température

Appuyez sur les boutons **MEM** et **C/F** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour changer l'échelle par défaut.
Trois bips sonores retentissent pour confirmer que le paramètre a été modifié.

Modifica della scala della temperatura

Tenere premuti i pulsanti **MEM** e **C/F** per 3 secondi per modificare la scala predefinita.
Vengono emessi tre suoni che confermano la modifica dell'impostazione.

온도계 변경

MEM 버튼과 **C/F** 버튼 두 개를 3초 동안 계속 누르면 기본 온도계가 변경됩니다.
신호음이 3회 울리면 설정이 변경되었음을 확인할 수 있습니다.

De temperatuurschaal wijzigen

Houd de knoppen **MEM** (Geheugen) en **C/F** gedurende 3 seconden tegelijk ingedrukt om de standaardschaal te wijzigen.
Daarna hoort u drie pieptonen ter bevestiging dat de instelling is aangepast.

Endre temperaturskalaen

Trykk og holde inne knappene **MEM** og **C/F** i 3 sekunder for å endre standardskalaen.
Endring av innstillingen bekreftes med tre pipelyder.

Zmiana skali temperatury

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **MEM** oraz **C/F** przez 3 sekundy, aby zmienić skalę domyślną.
Zmiana ustawień jest potwierdzana przez trzy sygnały dźwiękowe.

Modificar a escala de temperatura

Prima e mantenha premidos os botões **MEM** (Memória) e **C/F** (Celsius/Fahrenheit) durante 3 segundos para modificar a escala predefinida.
Três sinais sonoros confirmar a modificação da configuração.

Изменение температурной шкалы

Чтобы поменять шкалу, используемую по умолчанию, нажмите и удерживайте одновременно кнопки **MEM** (ПАМЯТЬ) и **C/F** в течение 3 секунд.
Три звуковых сигнала подтвердят то, что данная настройка изменилась.

Spreminjanje temperaturene skale

Pritisnite in držite tipki **MEM** in **C/F** 3 sekunde, da spremenite prednastavljeno skalo.
Trije piski potrjujejo spremembo nastavitve.

Ändra temperaturskalan

Tryck och håll ner knapparna **MEM** och **C/F** under 3 sekunder om du vill ändra standardskalan.
Tre signaler ljuder för att bekräfta att inställningen är ändrad.

Sıcaklık ölçeğinin değiştirilmesi

Varsayılan ölçeği değiştirmek için **MEM** (HAFIZA) ve **C/F** düğmelerine basın ve 3 saniyebasılı tutun.
Ayarın değiştirildiğini doğrulayan üç bip sesi duyulur.

更改温度刻度

按住 **MEM** (内存) 和 **C/F** 按钮 3 秒可更改默认刻度。
系统会发出三声蜂鸣声以确认设置已更改。

變更體溫計上的溫標

同時按住 **MEM** (記憶) 和 **C/F** (攝氏 / 華氏) 按鈕 3 秒鐘，即可以變更溫標。
三聲嗶聲即可確認設定已變更。