




Hillrom™

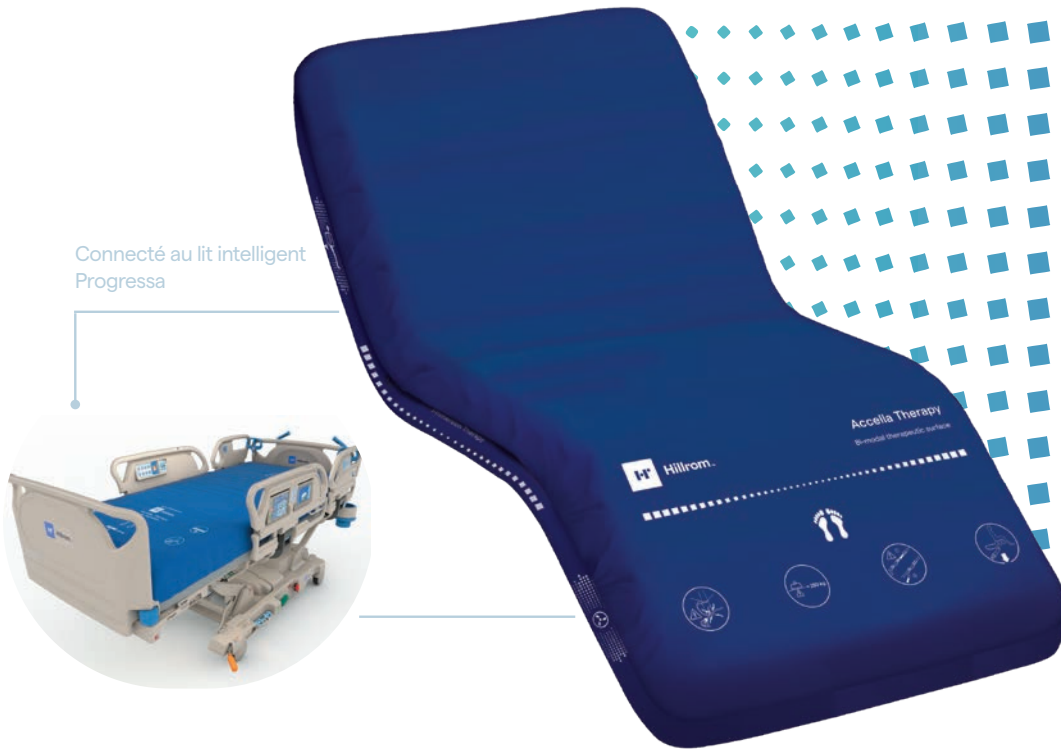

Connecté au lit intelligent
Progressa

SYSTÈME DE LIT PROGRESSA® AVEC MATELAS THÉRAPEUTIQUE ACCELLA™

Surface pour la gestion des soins cutanés avec la thérapie I-mmersion™ et la gestion du microclimat pour une meilleure protection contre les escarres.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La surface thérapeutique Accella Therapy, contrôlée grâce à l'interface graphique du soignant située sur les barrières latérales avec commandes intégrées, comprend la commande de remise à plat en un seul bouton, la fonction Boost et fournit les thérapies permettant de prévenir et de traiter les escarres

Le dégonflage de la surface en une seule touche permet un dégonflage rapide pour faciliter la mobilisation du patient

La fonctionnalité P-MAX permet un gonflage rapide et offre ainsi un repositionnement et un transfert simplifiés du patient

Le passage cassette radio intégré permet de réduire les actions de repositionnement et donc l'inconfort du patient pendant les procédures radiologiques

Les modes thérapeutiques par basse pression continue ou alternée offrent une flexibilité dans le traitement du patient

L'ajustement de la pression en temps réel grâce au capteur interne I-mmersion permet de régler la pression des cellules en fonction de la taille, de la morphologie, du poids ou de la position du patient dans le lit, sans intervention du soignant

La gestion du microclimat limite les effets de la chaleur et l'accumulation d'humidité

Les cinq zones basse pression indépendantes permettent une redistribution optimale de la pression

La zone spécifique aux talons à ultra-basse pression permet une protection optimale de la zone sensible des talons, avec soutien optimisé de la partie inférieure des jambes



Système de lit Progressa® avec matelas thérapeutique Accella™

Cette combinaison donne aux patients et aux soignants les moyens d'employer des traitements directement au lit afin de mieux soigner les patients les plus critiques plus rapidement. Plus qu'un simple lit, le lit intelligent Progressa équipé de la surface thérapeutique Accella Therapy est un dispositif à visée thérapeutique, qui agit comme une extension de l'équipe de soins.

La surface thérapeutique Hillrom Accella Therapy permet de prévenir et traiter les escarres chez les patients adultes présentant un risque faible à très élevé en luttant contre les facteurs de risques externes qui favorisent les lésions cutanées. La surface thérapeutique Hillrom Accella Therapy propose les modes basse pression continue ou basse pression alternée, offre une thérapie l'immersion réelle afin d'atteindre et de maintenir les pressions d'interface les plus basses possible.

Dans les deux modes, le niveau précis de redistribution de la pression est continuellement et automatiquement contrôlé par le capteur interne l'immersion qui régule la pression des cellules internes en fonction de la taille, du poids et de la position dans le lit de chaque patient.

Le système breveté MCM permet également de gérer le microclimat du patient et de réduire le risque de lésion tissulaire lié à une exposition excessive à la chaleur et/ou à l'humidité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA SURFACE

Charge maximale de sécurité	250 kg	
Poids thérapeutique recommandé	40 à 160 kg	
Surface	Longueur	215 cm
	Largeur	92 cm
	Hauteur	21,5 cm
	Poids	17,5 kg
Matériau de la housse	Revêtement en polyuréthane sur matériau polyamide, fermeture éclair 360°, coutures renforcées, faible frottement, matière bi-extensible, perméable à la vapeur, bactériostatique, fongistatique et antimicrobien. Peut être essuyé et lavé.	
Passage cassette radio	Standard	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LIT

Longueur totale	Relève-jambes étendu	248,9 cm
	Relève-jambes rétracté	223,5 cm
Largeur maximale	Barrières latérales abaissées	103 cm
	Barrières latérales relevées	103 cm
Inclinaison maximale du relève-buste	Sans Chair Egress (sortie de lit)	67°
	Avec Chair Egress (sortie de lit)	77°
Position proclive maximale	18°	
Compatibilité avec ampli de brillance	Oui	

Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hillrom local ou consultez notre page Web à l'adresse suivante :

hillrom.com

Les avantages de ce dispositif sont la prévention des escarres de stade I à stade IV et le traitement. Il est adapté aux patients présentant un risque faible à très élevé, dont le poids est compris dans les limites recommandées (entre 30 et 160 kg sur le matelas autonome et entre 40 et 160 kg sur la version combinée avec le lit Accella™ ou le lit Progressa™) afin d'obtenir des performances cliniques validées dans toutes les positions habituelles du relève-buste réglable. Organisme notifié : GMED CE0459. Fabricant : Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hillrom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Hillrom se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.