

À PROPOS DE HILLROM

Hillrom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, dont les 10 000 salariés n'ont qu'un seul objectif : améliorer l'efficacité des soins pour les patients et les soignants en développant les soins connectés. Partout dans le monde, nos innovations concernent chaque jour plus de 7 millions de patients. Elles permettent de réaliser un diagnostic et de mettre en place un traitement plus rapidement, d'optimiser l'efficacité chirurgicale et d'accélérer le rétablissement des patients tout en simplifiant la communication clinique et en rapprochant les soins du domicile du patient. Ces améliorations sont possibles grâce à de nombreuses solutions connectées : lits intelligents, solutions de transfert, technologies d'évaluation et de surveillance des patients, outils de collaboration pour les soignants, appareils de soins respiratoires, équipements avancés destinés aux salles d'opération, etc., offrant une vision exploitable en temps réel dans le continuum de soins. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hillrom.com.



Hillrom™

hillrom.com

Le lit Hillrom 900 est destiné à être utilisé dans des environnements de soins intensifs, de soins généraux et de soins ambulatoires pour des patients pesant ≥ 40 kg, mesurant ≥ 146 cm et présentant un IMC ≥ 17 .

Classe I

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hillrom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hillrom se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie accordée par Hillrom est la garantie expresse écrite sur la vente et la location de ses produits.



LIT HILLROM® 900

Sécurité renforcée. Tâches simplifiées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

L'abaissement des demi-barrières latérales peut être activé d'une main et est doté d'un mécanisme d'auto-abaissement rapide et fluide permettant un accès instantané au patient

La poignée de sortie latérale placée de manière ergonomique permet au patient de bénéficier d'un support stable lors de sa sortie de lit

Les commandes au lit sont intuitives, ne nécessitent qu'une formation minimale du personnel et contribuent à limiter le risque d'erreur de l'utilisateur

La position de sortie de lit à commande unique positionne le lit pour une sortie de lit plus facile et plus sécurisée

AutoContour™ et SlideGuard™ minimisent la migration du patient vers le bas du lit, tout en réduisant la compression de l'abdomen lors de l'articulation du lit

EasyChair™ et la fonction de remise à plat du plan de couchage permettent aux patients de s'asseoir rapidement dans une position confortable

L'indicateur de position basse signale au soignant que le lit n'est pas dans sa position la plus basse, afin d'assurer un environnement plus sûr pour le patient

La présence d'une 5ème roulette facilite le déplacement du lit dans toutes les directions

Le positionnement d'urgence à commande unique replace la partie supérieure du couchage à l'horizontale et installe le lit en position de déclive en cas de complications pour le patient

La veilleuse de nuit intelligente assure une meilleure sécurité opérationnelle pour les patients et les soignants

Alerte les soignants d'une possible sortie de lit via l'alarme de sortie de lit à 3 modes, disponible avec les fonctions de surveillance à distance*


* Option uniquement disponible sur certains marchés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale de sécurité 220 kg 250 kg	+ o
Poids du lit	144 kg
Hauteur variable	38,9 à 76,8 cm
Relève-buste SlideGuard	jusqu'à 12 cm
Classe de protection	IPX4
Angles du lit Tête de lit Plicature genoux Relève-jambes Déclive/Proclive	0 à 65° 0 à 28° -22 à -3° -17 à +17°
Plan de couchage Largeur Longueur	90 cm 200 cm
Surface du plan de couchage	Stratifié haute pression (HPL)
Hauteur des barrières latérales	39,3 cm
Roulettes 150 mm, intégrales 125 mm, double galets** 150 mm, double galets	+ o o
Roulette directionnelle En tête de lit En pied de lit	+ o
5ème roulette	o
Pédales de freinage et de guidage En pied de lit En tête et pied de lit**	+ o
Alarme de frein	o
Alarme de sortie de lit à 3 modes	o
Appel infirmier	o
Commandes Intégrées aux barrières latérales Non intégrées aux barrières latérales (boîtier de commande) Boîtier de commande** Commande sur bras flexible** Boîtier de commande soignant au pied du lit** Pédale de commande de hauteur variable bilatérale	+ o o o o o
Tête de lit Mobile Fixe	+ o
Indicateur de position basse**	+
Fonctions EasyChair et de remise à plat du plan de couchage	+
Veilleuse de nuit intelligente	o
Positionnement d'urgence à commande unique**	o
Rallonge de lit avec porte-couverture	o

+ = inclus ; o = en option

** Uniquement disponible en combinaison avec des options sélectionnées. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Hillrom local.

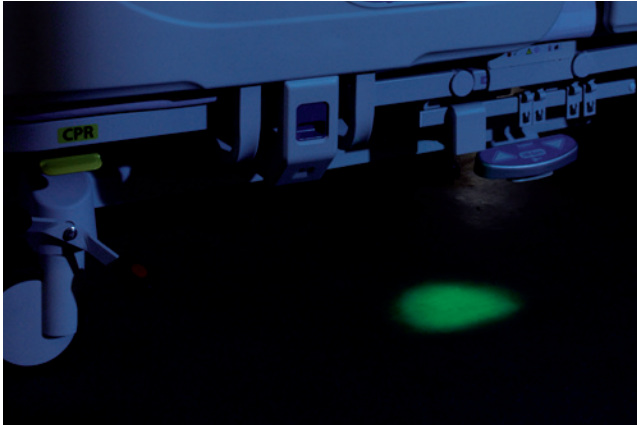

Veilleuse de nuit intelligente en option



Indicateur de position basse et positionnement de sortie de lit à commande unique



Roulettes de 125 mm à double galets en option**



Alarme de sortie de lit à 3 modes en option



Poignées assurant une bonne prise en main et commandes intégrées



Pédale de commande de hauteur variable bilatérale (en option) avec verrouillage automatique et 5ème roulette directionnelle

CARACTÉRISTIQUES STANDARD SUPPLÉMENTAIRES

- Commande CPR mécanique bilatérale
- 6 points de fixation pour les dispositifs de contention du patient
- Supports pour potence et tiges porte sérum
- Support pour accessoires bilatéral
- Support pour câble électrique
- Dispositif réglable de maintien du matelas
- Batterie
- Têtes et pieds de lit amovibles
- Indicateurs d'angle du relève-buste Line-of-Site et de la déclive
- Positionnement de sortie de lit à commande unique
- Freinage centralisé
- Témoin de maintenance