


Matelas viscoélastique Hill-Rom NP150

Prévention efficace et sûre des escarres, avec ajustement automatique

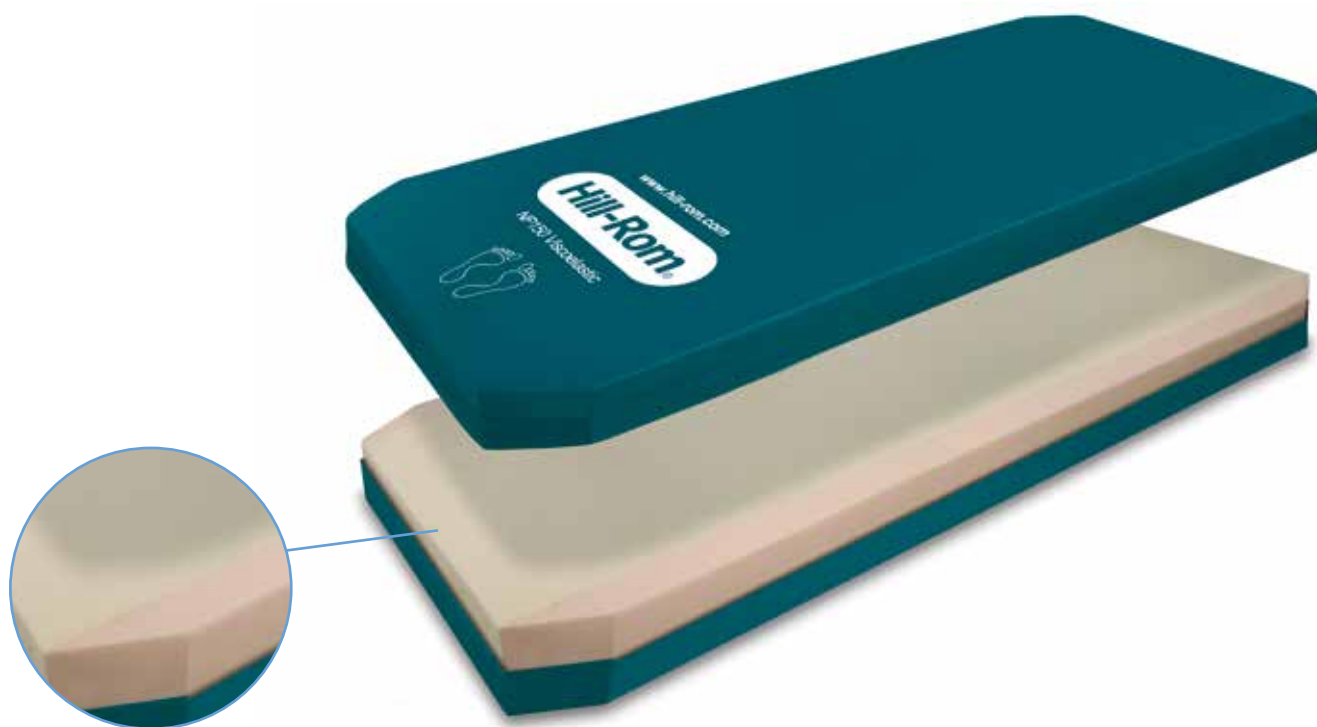

Caractéristiques et avantages

- S'adapte parfaitement à la morphologie et agit sur les interfaces entre les couches afin de réduire la pression
- Housse soudée avec poignées de transport intégrées
- Nettoyage aisé, hygiène assurée
- Les sections latérales hautes densités ont été conçues pour optimiser la sécurité du patient et faciliter la sortie du lit
- S'adapte à la plupart des châssis de lit et à toutes les positions de lit
- Perméable aux rayons X* et sans latex
- Le compartiment pour cassette radiologique intégré en option aide à réduire l'inconfort du patient lors du repositionnement au cours des procédures radiologiques portables

* Modèles ASS095 et ASS099 uniquement

Matelas viscoélastique Hill-Rom NP150

Matelas viscoélastique en mousse thermosensible

Le matelas viscoélastique Hill-Rom NP150 a été spécialement conçu pour prévenir les escarres. La mousse viscoélastique thermosensible épouse les formes du patient et répartit uniformément son poids dans toutes les positions, pour un plus grand confort et une meilleure redistribution des pressions. Il s'adapte à la plupart des châssis de lit et à toutes les positions de lit.

Entièrement protégé par une housse en polyuréthane élastique étanche, perméable à la vapeur et dotée de propriétés bactériostatiques et fongistatiques, ce matelas est très facile à nettoyer et à désinfecter pour une meilleure hygiène des patients et des soignants.



Une extension de longueur est disponible avec le matelas viscoélastique Hill-Rom NP150

Taille standard : 198 cm

+5 cm

Caractéristiques techniques

Matelas (tailles personnalisées disponibles)

Longueur	198 ou 203 cm
Largeur	85 ou 90 cm
Hauteur	14 cm

Garantie

Hill-Rom offre une garantie de 5 ans sur la mousse et une garantie de 2 ans sur la housse. Pour plus d'informations sur la garantie, contactez votre représentant local Hill-Rom.

Charge maximale de sécurité 250 kg

Poids thérapeutique recommandé 30 à 150 kg

Coutures soudées

Désinfection

Utiliser des solutions à base de chlore. Leur concentration doit être inférieure ou égale à 1 000 ppm (ou 10 000 ppm avec la version XT).

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays et pour tous les environnements de soins. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : **chaque jour, à travers le monde, nous améliorons les résultats pour les patients et les soignants.**

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom local ou consulter notre site Web à l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

La surface Hill-Rom NP 150 aide à prévenir les escarres chez les patients présentant un risque nul ou un risque faible à modéré, dont le poids se situe entre 30 kg et 150 kg et dont la taille est égale ou supérieure à 1,46 m dans différents environnements de soins de santé.

Classe I

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. n° : 5FR116303-04, 30 juin 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom