


# Liko™ Multirall™ 200

Un lève-personne plafonnier polyvalent

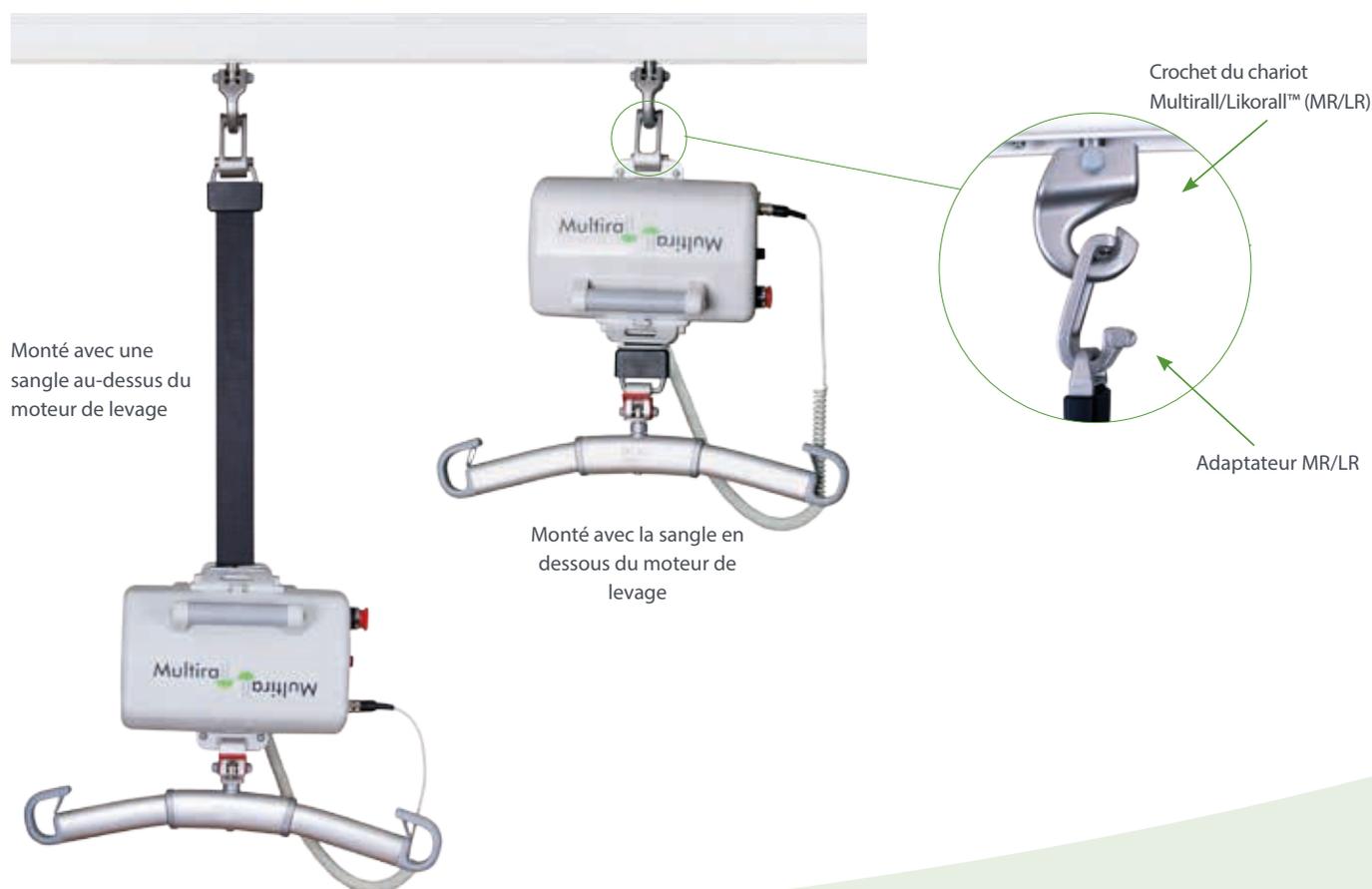

Dans les environnements de soin tels que les hôpitaux et les maisons de retraite, les besoins en termes de levage varient en fonction du niveau de mobilité du patient. C'est ainsi qu'un lève-personne plafonnier nomade peut être une solution plus intéressante qu'un lève-personne mobile. Multirall est une solution de levage nomade avantageuse. Elle permet également de transférer un patient de salle à salle en position assise, en se déplaçant facilement d'un système de rails à un autre à l'aide d'une sangle.

## Caractéristiques et avantages

Peut être monté de deux manières :

1. Avec la sangle en dessous du moteur de levage, pour une utilisation plus stationnaire
2. Avec la sangle au-dessus du moteur de levage, pour une utilisation plus mobile

L'adaptateur MR/LR propose une interface sûre et facile à utiliser entre le Multirall et le crochet du chariot MR/LR, quel que soit son montage

Facile à déplacer grâce à l'adaptateur MR du bras d'extension en option, qui ne nécessite aucun outil

Les grandes poignées situées de chaque côté du moteur permettent un **transport facile**

Il peut être utilisé avec tous les systèmes de rails Liko, y compris avec FreeSpan™, l'option autonome

Une large gamme d'accessoires est disponible, avec notamment des harnais, des étriers, des pese-personnes et le chariot Multirall

# Liko Multirall 200

## Caractéristiques techniques

Charge maximale de sécurité	200 kg
Poids du moteur de levage	8,7 kg
Options d'étrier	Étrier Mini 220, Étrier Universel 350, Universel 450, Universel 600, Étrier Universel 670 TwinBar, Étrier croisé
Connexions de l'étrier	À fixation rapide
Classe de sécurité du moteur de levage	IP 30
Abaissement d'urgence	Manuel et électrique
Vitesse de levage	60 mm/s

Intervalle de levage	1600 mm
Niveau sonore	62,2 dB(A)
Batterie	2 x 12 V CC (2,4 Ah - 2,6 Ah) Plomb-acide à valves Batteries à gel
Chargeur de batterie	Recharge murale
Télécommande	Filaire
Télécommande - classe de protection	IP 43
Numéro de produit	3130001

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché et qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays. Nous nous focalisons sur des solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Partout dans le monde, les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : **améliorer chaque jour les résultats pour les patients et les soignants.**

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Liko Multirall 200 est destiné à être utilisé dans toutes les situations courantes de levage et de transfert, comme, par ex., le transfert depuis le lit vers le fauteuil roulant et depuis/vers le sol, les passages aux toilettes, l'entraînement à la marche et pour les levages horizontaux à l'aide de brancards.

Classe : I

Fabricant : Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Suède

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils. Celles-ci se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien correct de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
Doc. n° : 5FR183328-01, 17 juillet 2017

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers.

**Hill-Rom**