

Hillrom™

Lève-personnes plafonniers Likorall®  
200, 242, 250

# Lève-personnes plafonniers Likorall®

## UNE CONCEPTION RÉFLÉCHIE ET INTUITIVE, AVEC UN ACCENT PARTICULIER SUR LA SÉCURITÉ.

Le lève-personnes Likorall est réputé pour toutes ces qualités, et bien plus encore, ce qui fait de ce lève-personnes plafonnier un système adapté à une grande variété d'environnements de soins de santé.


### Toujours la sécurité avant tout

- Abaissement d'urgence mécanique ou électrique disponible
- Le capot de sécurité breveté ajoute une sécurité supplémentaire et garantit un abaissement régulier et contrôlé
- L'interrupteur de fin de course anti-compression protège le moteur de levage des contraintes mécaniques et aide à prévenir les blessures chez les patients et les soignants
- Le modèle Room-to-Room (R2R) (pièce à pièce) vous permet de déplacer efficacement les patients d'une salle à une autre sans connexion de rail continue
- Sur le modèle ES, la télécommande peut vous aider à passer les aiguillages et les rotondes.
- Le système de levage plafonnier UltraTwin se compose de deux moteurs de levage Likorall qui fournissent une capacité de levage combinée.
- Charge maximale de sécurité
  - + Modèles standard : 200-250 kg, selon le modèle
  - + Modèle UltraTwin : 400-500 kg, selon le modèle



#### Déplacement du moteur de levage (sauf modèles LR242 S et LR242 ES)

Le chariot de fixation rapide Quick-Release Hook™ facilite le déplacement du système entre les salles.

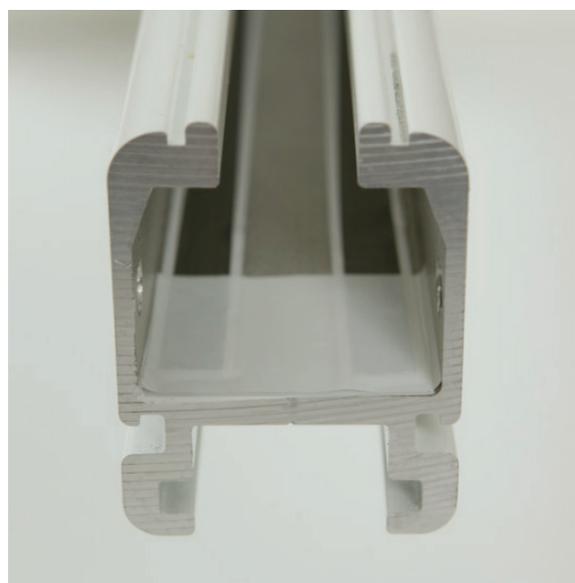

#### Recharge le long du rail (recharge le long du rail avec Likorall 250 S uniquement)

L'unité de levage est en permanence chargée tout au long du système de rail, donc celle-ci est toujours prête à l'emploi.

## Modèles disponibles

Systèmes de lève-personne plafonnier Likorall® 200 | 242 S, S R2R, ES, ES R2R, 250 ES, S IRC



	LR200	LR242 S	LR242 S R2R	LR242 ES	LR242 ES R2R	LR250 ES	LR250 S IRC
Charge maximale admissible	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	250 kg
Intervalle de levage	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Vitesse de levage	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s
Technologie de batterie	Plomb	Plomb	Plomb	Plomb	Plomb	Plomb	Plomb
Quick Release Hook (système de détache rapide - sans adaptateur)	X		X		X	X	X
Abaissement électrique d'urgence	X	X	X	X	X	X	X
Abaissement d'urgence manuel		X		X			
Abaissement d'urgence électrique accessible à hauteur d'homme	X						
Abaissement d'urgence manuel accessible à hauteur d'homme		X		X			
Pièce à pièce (Système Room-to-Room)			X		X		
Crochet fixe (sans adaptateur)		X		X			
Recharge le long du rail							X
Compatibilité du moteur de transfert				X		X	
Poids du moteur (kg)	12,5	13	13,2	13	13,2	12,6	12,6
Dimensions (L x l x H)	340 mm x 250 mm x 165 mm / 13,39" x 9,84" x 6,5"						



**Hillrom™**

## À PROPOS DE HILLROM

Hillrom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, dont les 10 000 salariés n'ont qu'un seul objectif : améliorer l'efficacité des soins pour les patients et les soignants en développant des soins connectés. Partout dans le monde, nos innovations concernent chaque jour plus de 7 millions de patients. Elles permettent de réaliser un diagnostic et mettre en place un traitement plus rapidement, d'optimiser l'efficacité chirurgicale et d'accélérer le rétablissement des patients tout en simplifiant la communication clinique. Ces améliorations sont possibles grâce à de nombreuses solutions connectées : lits intelligents, lève-personnes, technologies d'évaluation et de surveillance des patients, outils de collaboration pour les soignants, équipements avancés destinés aux salles d'opération et bien d'autres produits. Ces solutions fournissent des informations en temps réel exploitables sur le lieu d'intervention. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [hillrom.com](https://hillrom.com).

**Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial Hillrom.**

**[hillrom.com](https://hillrom.com)**

---

### LÈVE-PERSONNES PLAFONNIERS

Le lève-personne plafonnier Likorall® est un lève-personne à usage général conçu pour les soins de santé, la réanimation et la rééducation. Le lève-personne plafonnier Likorall est conçu et développé pour la gamme complète de systèmes de levage fixes et autonomes Hillrom.

Classe 1

Fabricant : Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, Suède

Ces produits sont des produits de santé réglementés qui portent le marquage CE lorsque la réglementation en vigueur l'exige. Hillrom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans la documentation accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hillrom se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

© 2020 Liko R&D AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS APR108303-FR-EMEA-r1 12-OCT-2020 FRENCH – EMEA